



12. Осторожно надавите на пробирку пока игла адаптера не проколёт резиновую мембрану крышки пробирки. Если все сделано правильно, пробирка начнет заполняться мочой.



13. Удерживайте пробирку в адаптере до ее максимального заполнения (до момента прекращения поступления мочи в пробирку).
14. После наполнения пробирки извлеките ее из адаптера и верните защитную этикетку на крышку контейнера.

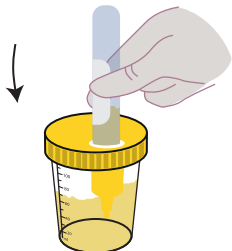

15. Перемешайте мочу в пробирке, медленно покачивая ее 8-10 раз из стороны в сторону (не трясите и не переворачивайте пробирку).

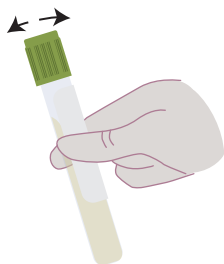

16. Слейте оставшуюся в контейнере мочу в унитаз, а затем утилизируйте контейнер.
17. Заполните все графы идентификационного листа данными пациента, у которого был взят биоматериал.
18. Пробирку с мочой, идентификационный лист и карту с уникальным кодом\* поместите в транспортировочный пакет типа зиплок.
19. Закройте транспортировочный пакет, принесите его в офис ЛабКвест/Q-клиники или передайте курьеру.



**\*Внимание!**  
**Обязательно вложите карту с уникальным кодом. Он потребуется для оформления исследования.**

### ВНИМАНИЕ!

Если на фоне острых симптомов (частое мочеиспускание малыми порциями) невозможно получить достаточный объем биоматериала, допустимо собрать меньший объем мочи.

### Способы получения результата:



Результат будет отправлен на указанную Вами при оформлении электронную почту.



Также результат будет доступен в личном кабинете на сайте **www.labquest.ru** или в мобильном приложении.

АО «ЛабКвест», лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ПРАВИЛЬНОМУ СБОРУ МОЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ «СТОП-ЦИСТИТ»

### Состав набора:

- инструкция – 1 шт.
- карта с уникальным кодом – 1 шт.
- идентификационный лист – 1 шт.
- специальный контейнер для сбора мочи с адаптером – 1 шт.
- пробирка с консервантом BD Vacutainer® (с крышкой оливкового цвета) – 1 шт.
- пакет типа зиплок для упаковки биоматериала – 1 шт.

### ВАЖНО!

Стерильный контейнер для мочи предназначен **для сбора мочи, а не для хранения и транспортировки биоматериала!** С целью хранения и транспортировки биоматериала используется пробирка с оливковой крышкой BD Vacutainer®.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

## ПОДГОТОВКА И СБОР МОЧИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа нужно собрать спонтанную порцию мочи. Рекомендуется изучить все пункты инструкции до начала процедуры сбора пробы.

1. Проведите тщательный туалет наружных половых органов.
2. Откройте крышку контейнера для мочи, повернув ее против часовой стрелки.




3. Положите крышку наружной стороной на чистую поверхность так, чтобы защитная этикетка находилась снизу.



### ВАЖНО!

Не прикасайтесь к внутренней поверхности контейнера и крышки.

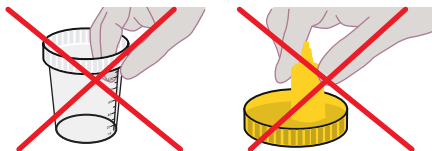

4. Начните мочеиспускание в унитаз.

### ВАЖНО!

Моча, выделяемая в течение первых 2 секунд — это первая порция, её собирать не нужно! Она содержит примеси, которые могут исказить результат исследования.

5. По истечении 2 секунд от начала мочеиспускания подставьте контейнер и наберите не менее 10 мл средней порции мочи (объем мочи, необходимый для заполнения пробирки).



6. Закончите мочеиспускание в унитаз.

### ВАЖНО!

Последнюю порцию мочи собирать не нужно, это может исказить результат исследования.

7. Плотнo закрутите крышку контейнера, повернув ее по часовой стрелке.



8. Аккуратно перемешайте содержимое контейнера.



9. Приподнимите защитную этикетку на крышке контейнера (не снимайте этикетку полностью).



10. Возьмите пробирку BD Vacutainer® и держите ее в вертикальном положении крышкой вниз.
11. Вставьте пробирку в адаптер для пробирок (углубление в крышке) контейнера для сбора мочи.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА