

ПОДГОТОВКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СБОРУ БИОМАТЕРИАЛА ИЗ РОТО- И НОСОГЛОТКИ

- Отказаться от приема алкоголя за 24 часа до сбора образца.
- Запрещается полоскать рот и нос дезинфицирующими растворами за 4 часа до сбора образца.
- Запрещается рассасывать антисептические таблетки за 4 часа до сбора образца из ротоглотки.
- Воздержаться от приема пищи в течении часа до начала сбора образца.
- Воздержаться от курения в течение часа до начала сбора образцов.

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА БИОМАТЕРИАЛА

- Эппендорф с биологическим материалом поместите в маленький пакет типа зиплок.
- Заполните все графы идентификационного листа данными пациента, у которого был взят биоматериал, вложите его в маленький пакет типа зиплок вместе с эппендорфом, плотно закройте замок.
- В транспортировочный (большой) пакет поместите: запечатанный эппендорф с биоматериалом и заполненным идентификационным листом, а также карту с уникальным кодом.*
- Закройте транспортировочный пакет, транспортируйте его в кабинет Лабквест/Q-клиники или передайте курьеру.

***ВНИМАНИЕ!** Обязательно вложите карту с уникальным кодом! Без данного номера активация вашего исследования невозможна!

ИНСТРУКЦИЯ

по самостоятельному взятию биоматериала для выполнения исследования

Внимание!

Один набор предназначен только для одного пациента.

Перед манипуляцией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Зонд одноразовый стерильный для взятия биоматериала - 2 шт.
- Эппендорф с бесцветной транспортной средой - 1 шт.
- Пакет типа зиплок маленький - 1 шт.
- Транспортировочный пакет – 1 шт.
- Карта с уникальным кодом – 1 шт.
- Идентификационный лист – 1 шт.

Способы получения результата




Результат будет отправлен на указанную Вами при оформлении заявки электронную почту.



Также результат будет доступен в личном кабинете на сайте **www.labquest.ru**

Правила взятия мазка из ротоглотки

- Осуществлять взятие биоматериала удобнее перед зеркалом, при хорошем освещении.
- Помойте руки.
- Извлеките зонд из упаковки. Зонд стерилен, поэтому не кладите его на другие поверхности и не касайтесь им других предметов. Держите зонд в той руке, которой вам удобнее будет осуществить взятие мазка.
- Возьмите пробирку с транспортной средой в другую руку и откройте крышку.
- Слегка запрокиньте голову, широко откройте рот, глубоко вдохните.
- На вдохе проведите ворсистой частью зонда по правой миндалине, затем по небным дужкам к язычку, потом по левой миндалине и задней стенке глотки. Не прикасайтесь к корню языка и небному язычку, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс.
- Погрузите ворсистую часть зонда в пробирку с транспортной средой.
- Произведите несколько вращательных движений зондом, перемешивая среду. Отожмите тампон о внутреннюю сторону эппендорфа и извлеките зонд.
- Утилизируйте зонд.

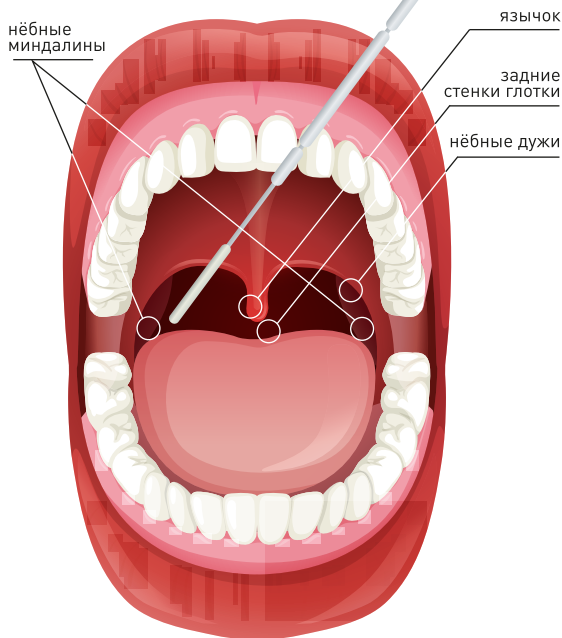

Правила взятия мазка из носоглотки

- Извлеките второй зонд из упаковки.
- Слегка запрокиньте голову, осторожно вводите зонд вдоль наружной стенки носового хода, а не носовой перегородки. Одновременно совершайте легкие вращательные движения и извлеките зонд вдоль НАРУЖНОЙ стенки носа. Тем же зондом повторите манипуляцию для второго носового хода.
- Погрузите ворсистую часть зонда в пробирку с транспортной средой.
- Произведите несколько вращательных движений зондом, перемешивая среду. Отожмите тампон о внутреннюю сторону эппендорфа и извлеките зонд.
- Утилизируйте зонд.

ВНИМАНИЕ! Если полость носа заполнена слизью, перед процедурой рекомендуется провести высмаркивание.



После взятия биоматериала тщательно вымойте руки с мылом